



Creating balance in healthcare



## Elexo Sedia da doccia e toilette



5100 5500

# Elexo Sedia da doccia e toilette



5100 5500

## Elexo Sedia da doccia e toilette con poggiatesta estraibili

La cura di clienti / degenti su carrozzine da doccia/toilette tradizionali è un'attività pesante. Il personale infermieristico è obbligato ad assumere una posizione innaturale e si trova ad affrontare un carico statico sulla schiena. Con la sedia da doccia e toilette Elexo, ad altezza regolabile, l'ospitalità offre una soluzione.

Elexo offre comfort e sicurezza al personale come al cliente / degente. La sua altezza flessibile, infatti, limita al minimo il carico sulla schiena del personale curante; ne deriva un importante contributo di Elexo al rispetto dei requisiti della legislazione sulle condizioni di lavoro nel settore sanitario.

La possibilità di regolare elettricamente l'altezza della sedia consente un ribaltamento massimo di 17 gradi in posizione di altezza massima, creando un equilibrio di seduta ottimale del cliente / degente.

- Facile regolazione elettrica in alto / basso.
- Comando manuale con spia batteria.
- Passaggio automatico alla modalità stand-by dopo 60 minuti.
- Carico massimo 180 kg.
- Altezza minima 50 cm, altezza massima 105 cm.
- Larghezza carrello 68 cm, profondità 83 cm.
- Ribaltamento massimo 17 gradi.
- Seduta imbottita con apertura centrale.
- Copri-foro per apertura centrale.
- Bracciolo imbottito pieghevole con elemento anteriore per trasferimento laterale.
- Seduta e schienale dal design ergonomico.
- Pedane pieghevoli con protezione del polpaccio.
- Poggiatesta girevoli a scomparsa ed estraibili.
- Guide per secchio o padella.
- Quattro ruote in plastica piroettanti con freno.
- Estremamente stabile grazie all'utilizzo di 2 motori di sollevamento.
- Facile da ricaricare con il caricabatteria in dotazione.





*Seduta dal design ergonomico con inserto.*



*Seduta dal design ergonomico per l'uso della toilette.*



*6950 1104 Padella in plastica.*



*Bracciolo indipendente imbottito pieghevole con elemento anteriore.*



*Comando manuale con spia batteria.*



*Presa per la ricarica con attacco magnetico.*



*Altezza minima 50 cm.*




*Ribaltamento 17 gradi.*

## Specifiche tecniche

• Larghezza seduta	48 cm	• Larghezza totale telaio base	68 cm
• Profondità seduta	46 cm	• Peso proprio	50 kg
• Altezza seduta regolabile da	50 a 105 cm	• Allaccio elettrico	24 V
• Carico massimo	180 kg	• Capacità batteria	7Ah
• Posizione basculata da	0° a 17°	• Caricabatteria	220V 50/60Hz 500mA
• Lunghezza totale telaio base	83 cm		

Elexo è un prodotto dotato di marchio CE che ne certifica la conformità alla direttiva 93/42/CEE, modificata con la direttiva 2007/47/CE sugli ausili medici, del marzo 2010.

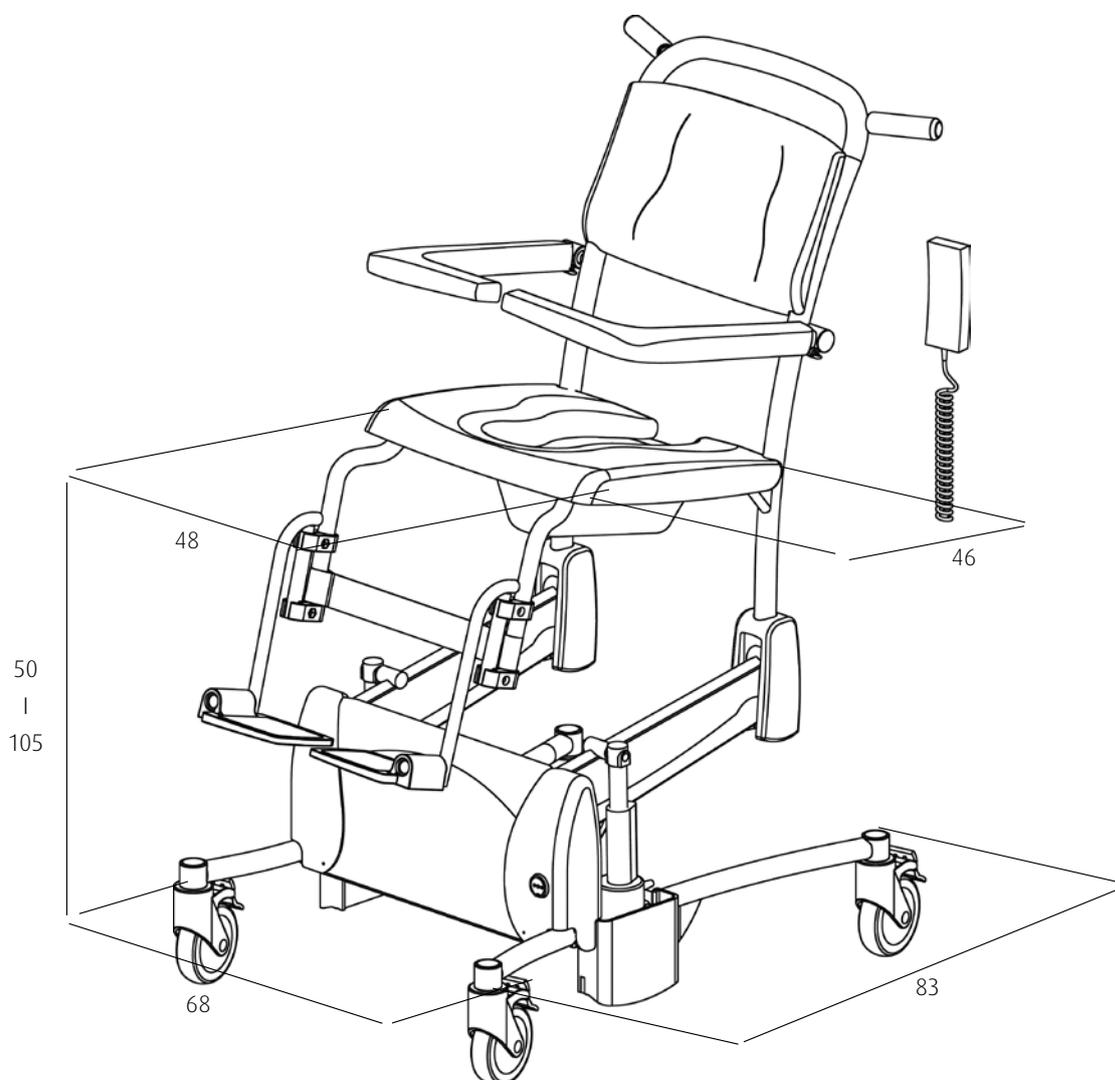

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito: [www.lopital.it](http://www.lopital.it)

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
 Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

