



Elexo XXL Sedia da doccia e toilette



5100 5300

Elexo XXL Sedia da doccia e toilette

5100 5300

Elexo XXL Sedia da doccia e toilette alto / basso

La cura delle persone obese su sedie tradizionali per doccia e per toilette è molto difficile. Il personale addetto all'assistenza è costretto ad adottare posizioni innaturali e deve affrontare carichi dorsali statici. La sedia per doccia e per toilette Elexo XXL per obesi di Lopital, con regolazione elettrica dell'altezza in continuo, offre una soluzione ottimale.

La possibilità di regolazione elettrica dell'altezza garantisce che la sedia, nella posizione di altezza massima, raggiunga un'inclinazione di 17 gradi e questo consente di avere un'ottimale equilibrio di seduta per l'utente. Anche la cura in questa posizione è più facile.

Il sedile ergonomico, i braccioli allungabili e completamente girevoli e il comodo sostegno per i polpacci garantiscono il massimo del comfort agli utenti.



Caratteristiche

- Facile da regolare in altezza elettricamente grazie al comando manuale alto / basso con indicazione della carica della batteria.
- Regolazione automatica dell'inclinazione fino a un massimo di 17 gradi.
- Tre ruote in plastica, orientabili e con freno doppio.
- Una ruota direzionale.
- Molto stabile grazie ai due motori di sollevamento.
- Guida per secchio o padella.
- Munita di funzione stand by dopo 60 minuti di mancato utilizzo.
- Batteria facile da caricare con il caricatore fornito.
- Braccioli allungabili e completamente girevoli.
- Seduta in due parti con apertura sulla parte anteriore e su quella posteriore.
- Sostegno ergonomico per i polpacci.
- Poggia-piedi girevoli e rimovibili.

In opzione


- Sostegno per la testa ergonomico e posizionabile a piacere.



Specifiche tecniche

Carico massimo:	220 kg (sollecitazione severa)
Peso della sedia:	75 kg
Inclinazione all'indietro:	17 gradi
Altezza sedile:	da 51 a 110 cm
Ampiezza sedile:	70,3 cm
Profondità del sedile:	60 cm
Capacità batteria:	2 x 12 V, 7,2Ah
Caricatore:	220 V 50/60Hz 500mA
	Accoppiamento magnetico
Controllo elettrico:	24 V
Corrente massima:	10 A
Potenza massima:	240 W
Sicurezza:	- Interruttore on / off - Arresto di emergenza - Tasto abbassamento di emergenza

Dimensioni in cm

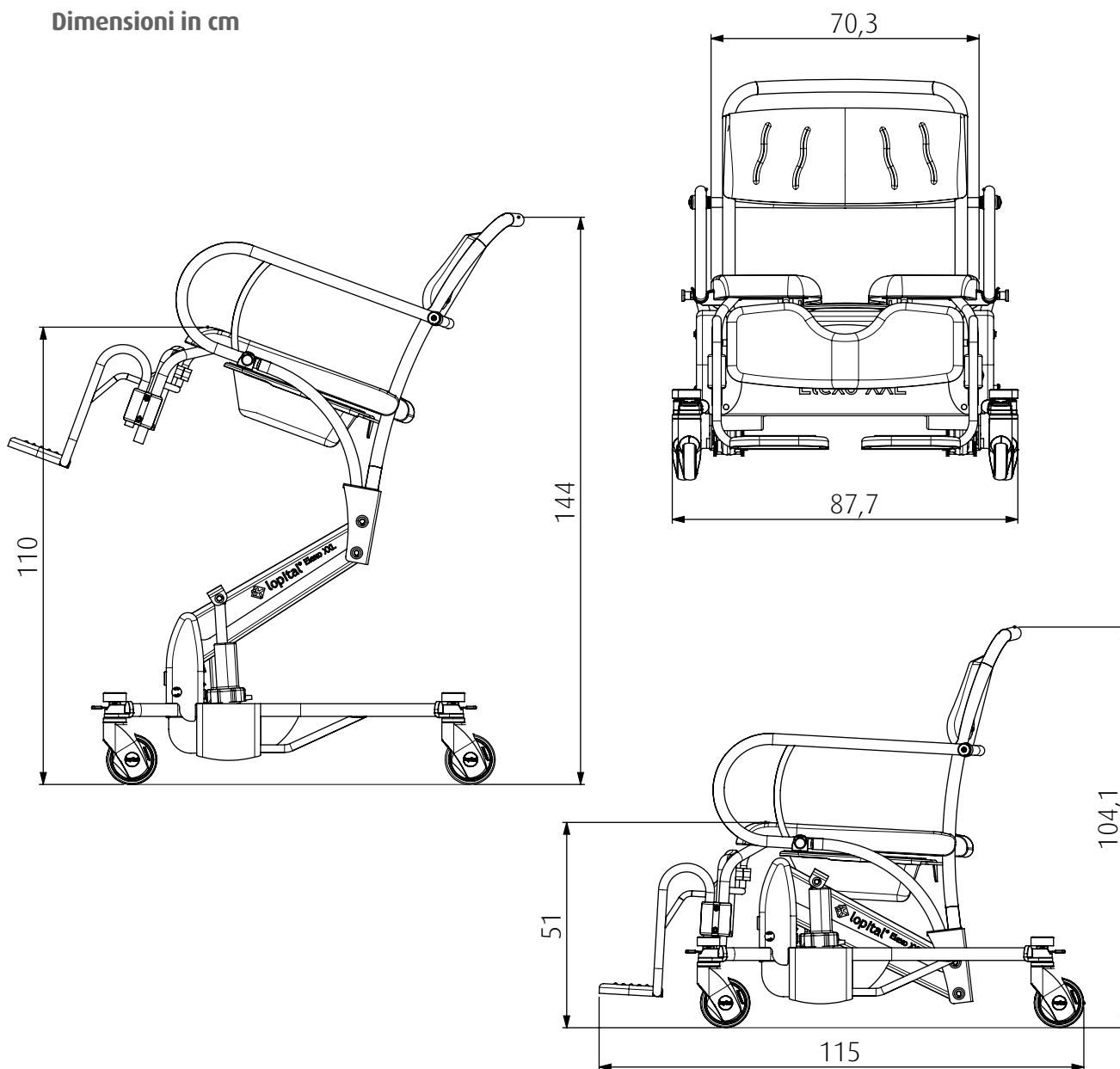

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito: www.lopital.it

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

